

Pflegebett Seracare Low

- ✓ ultra-niedrig Position (11 cm)
- ✓ individuelle Designs der Bettenden
- ✓ 8 Rollen für erhöhte Mobilität
- ✓ Rückzug der Rückenlehne



Rückenteil
0 – 80°



Fußteil
0 – 45°



Höhe
110 – 800 mm



Inkl.
Trendelenburg

Standard-Ausstattung

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90 x 200 cm mit verstellbaren Matratzenhaltern am Kopf- und Fußteil
- elektrische Höhenverstellung 110 - 800 mm
- max. Patientengewicht 185 kg, sichere Arbeitslast 220 kg
- elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 80° und Oberschenkellehne bis 45°
- Trendelenburg/Antitrendelenburg Funktion
- 8x Laufrollen 75 mm, einzelfeststellbar
- 29 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9 Volt-Batterie bei Stromausfall
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX4
- integrierte Bettverlängerung auf max. 30 cm
- Rückzug der Rückenlehne um 117 mm erleichtert die Atmung und reduziert Druck
- Außenmaße 2083 x 1145 mm

Das Ultra-Niedrig-Pflegebett Seracare Low vereint alle Anforderungen an Komfort, Ergonomie und Ästhetik eines modernen Pflegebetts. Die bodennahe Absenkung des Bettgestells dient der Sturzprophylaxe und ist somit ein idealer Begleiter für sturzgefährdete Menschen in Seniorenheimen.

Optionen

- Zentralbremse
- Liegefläche 105 x 200 cm, 120 x 200 cm
- verschiedene Dekore
- verschiedene Kopf- und Fußteil-Designs
- geteiltes Aluminium-Seitengitter
- durchgehende Holzseitengitter 95 mm





Pflegebett Seracare Low

Mögliche Dekore



Weißbuche




Nussbaum Standard



Kirsche Edel



Lindberg Eiche

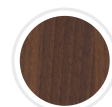

Bella Noce Schoko




Weitere

Zubehör für dieses Bett

Wir bieten umfangreiches Zubehör für das Pflegebett Seracare Low an.

- Aufstehhilfe
- Betttablett
- Unterbettleuchte mit Bewegungssensor
- Seitengitterpolsterung
- Wandabweissystem

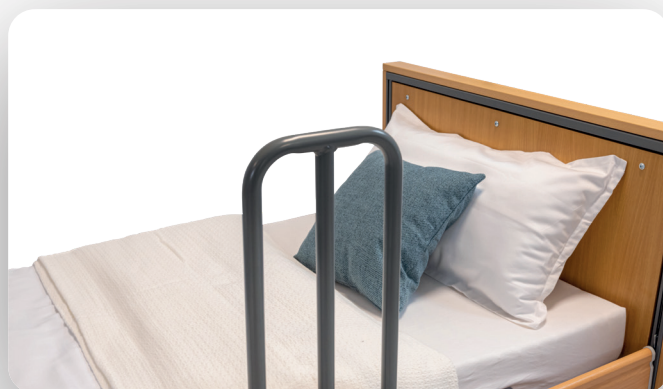

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

2 / 2

tecfor care GmbH
Fraunhoferstraße 8
D-51647 Gummersbach

✉ info@tecfor-care.com
☎ +49 (0) 2261 / 50 186 - 0
🌐 www.tecfor-care.com

 tecfor care