

UNIVERSALKISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.0011

Das **UNIVERSALKISSEN** passt sich perfekt an die jeweilige Körperregion an. Man kann es z. B. als Waden-, Kopf- oder als Armlagerungskissen bei Hemiplegikern verwenden.



NEG0605	XL	60 x 40 cm
NEG0606 (2 St.)	XL	40 x 30 cm
NEG0750	XL	70 x 50 cm
NEG1425 (Medium)	XL	60 x 40 cm
NEG0881	XS	45 x 30 cm

DELTAKISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.1013

Das **DELTAKISSEN** überzeugt durch seine trianguläre Form und sorgt somit für eine hervorragende Anpassung und Lagerung in der Kniebeuge des Patienten. Es ermöglicht die thorakale Abstützung bei der 30°- und der 135°-Seitenlagerung und die Weichlagerung einzelner Extremitäten. Zusätzlich ist es geeignet zur Durchführung der Spitzfußprophylaxe.




NEG0607	XL	60 x 40 cm
NEG1426 (Medium)	XL	60 x 40 cm
NEG0887	XS	42 x 25 cm

SEMI-FOWLER-KISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.1015

Das **SEMI-FOWLER-KISSEN** kann vielfältig eingesetzt werden: es erhöht den Oberkörper und stützt Kopf, Hals und Schultern – wobei es zu einer Druckentlastung der Schulterblätter führt. Unter den Oberschenkeln positioniert, sorgt es für Abduktion und Druckentlastung im Hüftbereich. Bei Anwendung unter Knie und Unterschenkel ermöglicht es die Fersenfreilagerung und Abduktion der Knie. In einer Sitzposition (z. B. im Rollstuhl) dient es der Stabilisierung der Unterarme.

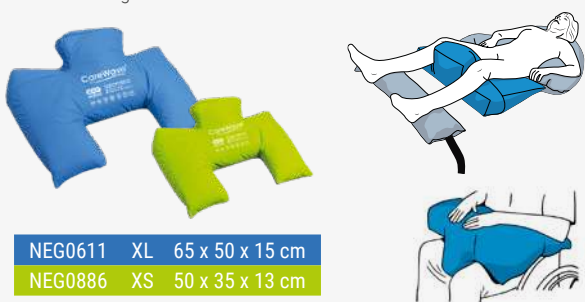


NEG0611	XL	65 x 50 x 15 cm
NEG0886	XS	50 x 35 x 13 cm

RINGKISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.0013

Das **RINGKISSEN** dient der Weichlagerung und Stabilisierung des Kopfes und der angrenzenden Halspartie. Der Kopf wird sicher positioniert, so dass die Pflegeperson beide Hände zur Bewegungsförderung des Patienten einsetzen kann.

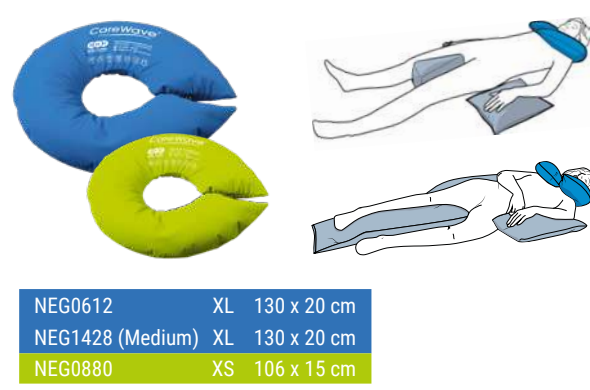


NEG0612	XL	130 x 20 cm
NEG1428 (Medium)	XL	130 x 20 cm
NEG0880	XS	106 x 15 cm

HALBMONDKISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.1014

Das **HALBMONDKISSEN** dient der erhöhten Lagerung von Kopf, Rumpf, Schultern und der oberen Extremitäten. Es kann ebenso zur Unterfütterung des Kniebereichs sowie zur Entlastung des Gesäß- und Kreuzbeinbereichs eingesetzt werden. In der 30°- und der 135°-Seitenlagerung stützt es sowohl Oberkörper als auch Becken und polstert die Knie.

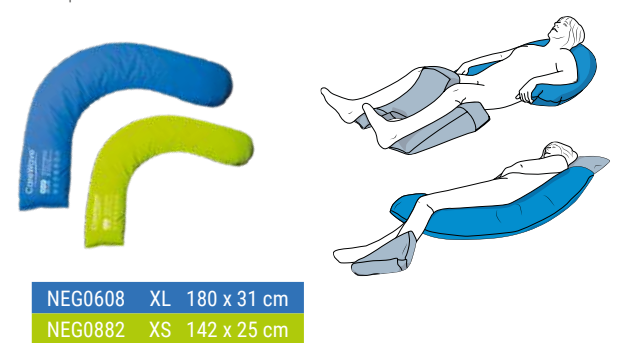


NEG0608	XL	180 x 31 cm
NEG0882	XS	142 x 25 cm

FERSENENTLASTUNGSGURT

HMV-Nummer: 11.11.05.0012

Der **FERSENENTLASTUNGSGURT** wird mittels eines einstellbaren Gurts auf der Matratze fixiert und dient so der Fersenentlastung in Rückenlage; am Fußteil des Betts angebracht auch zur Spitzfußprophylaxe verwendbar.

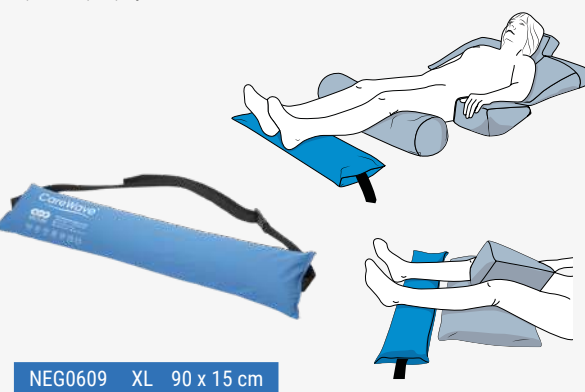

NEG0609	XL	90 x 15 cm
---------	----	------------

ZYLINDERKISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.0014

Das **ZYLINDERKISSEN** kann variabel eingesetzt werden, z. B. als Rückenstütze in der 30°-Seitenlagerung oder zur thorakalen Abstützung in der 135°-Lagerung. Ebenso ist es als Lagerungsstütze der Kniebeuge in Rückenlage, als Kopfpositionierungshilfe in der Seitenlage und zur Führung der unteren Extremitäten in der 135°-Seitenlagerung anwendbar.



NEG0613	XL	70 x 17 cm
NEG0614 (2 St.)	XL	31 x 17 cm
NEG1427 (Medium)	XL	70 x 17 cm
NEG0884	XS	45 x 14 cm

ABDUKTIONSKISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.0015

Das **ABDUKTIONSKISSEN** wird zur Abduktion der Knie oder zur Unterarmlagerung verwendet.




NEG0615	XL	30 x 20 x 15 cm
NEG0888	XS	23 x 18 x 12 cm

SEITENLAGERUNGSKISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.2002

Das **SEITENLAGERUNGSKISSEN** ermöglicht die Durchführung einer kompletten 30°-Seitenlagerung mit nur einem Kissen. Es passt sich dabei perfekt an die jeweilige Körperregion an, es stützt und dient dem Erreichen einer physiologischen Beinstellung im Liegen.

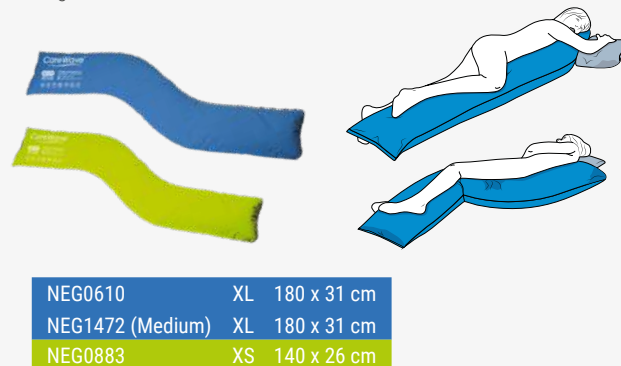


NEG0610	XL	180 x 31 cm
NEG1472 (Medium)	XL	180 x 31 cm
NEG0883	XS	140 x 26 cm

FERSENFREILAGERUNG

HMV-Nummer: 11.11.05.0016

Die **FERSENFREILAGERUNG** wird direkt am Fuß platziert, wobei die verstärkt unterfütterten Bereiche der Fußsohle und des Achillessehnenansatzes für eine Freilagerung der Ferse sorgen und die umgebenden Bereiche wirksam stabilisieren. Auch der innere und äußere Fußknöchel – als dekubitusgefährdete Regionen – werden durch die Weichpolsterung des Kissens sicher geschützt.

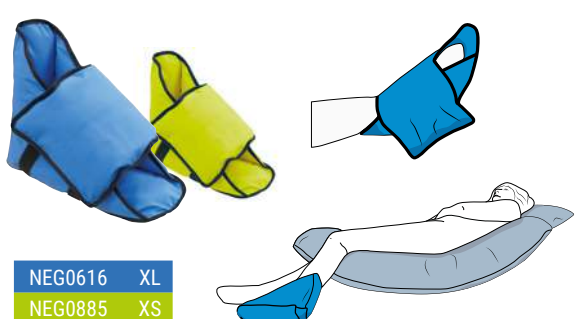

NEG0616	XL	
NEG0885	XS	

HEMI-ARMKISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.0017

Das **HEMI-ARMKISSEN** dient zur individuellen Positionierung und Weichlagerung eines paretischen Armes, z. B. nach einem Schlaganfall. Es ist rechts wie links einsetzbar.




NEG0732	XL	58 x 36 + 48 x 16 Ø cm
NEG0889	XS	45 x 30 + 30 x 13 Ø cm

RÜCKENLAGERUNGSKISSEN

HMV-Nummer: 11.11.05.2007

Durch das **RÜCKENLAGERUNGSKISSEN** können verschiedene Körperteile gleichzeitig positioniert, freigelagert und/oder stabilisiert werden. Weiterhin dient es der Basalen Stimulation und zur Vorbeugung des Verlustes der eigenen Körperwahrnehmung. Das Rückenlagerungskissen fördert die Wahrnehmung in den Grenzbereichen des Körpers. Es kann auch in der 30°-Seitenlagerung als Stütze von Oberkörper, Becken und der Beine angewendet werden.

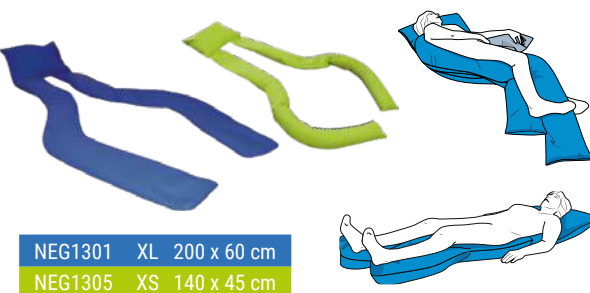

NEG1301	XL	200 x 60 cm
NEG1305	XS	140 x 45 cm

CareWave®



CAREWAVE-LAGERUNGSKISSEN

Produktlinie zur Patientenpositionierung im Pflegebett

SHP-CareWave Lagerungskissen sind als statische Positionierungshilfen für Leib, Rumpf und Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitusunterstützung geeignet. Sie wirken nach dem Weichlagerungs-, Umlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützen je nach Kissenart bei der Lagerung und Positionierung besonders gefährdeter Körperteile bzw. Körperregionen.

- Bezug:** bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) 100 % Polystyrolkugeln
- Füllung:** flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette
- Eigenschaften:** chlorfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel benutzen
- Zubehör:** Ersatzbezüge Lenzing FR®, PU oder Baumwolle erhältlich (nur für blaue Kissen)



DEMO-SET I – 7-TEILIG



Bestellnr.	Bezeichnung	HMV-Nr.
NEG0657	DEMO-Set I – 7-teilig	-
bestehend aus:		
NEG0605	Universalkissen XL	11.11.05.0011
NEG0616	Fersenfreilagerung XL	11.11.05.0016
NEG0608	Halbmondkissen XL	11.11.05.1014
NEG0612	Ringkissen XL	11.11.05.0013
NEG0613	Zylinderkissen XL	11.11.05.0014
NEG0610	Seitenlagerungskissen XL	11.11.05.2002
NEG0617	Transporttasche XL	-

DEMO-SET II – 7-TEILIG



Bestellnr.	Bezeichnung	HMV-Nr.
NEG1560	DEMO-Set II – 7-teilig	-
bestehend aus:		
NEG0881	Universalkissen XS	11.11.05.0011
NEG0611	Semi-Fowler-Kissen XL	11.11.05.1015
NEG0732	Hemi-Armkissen XL	11.11.05.0017
NEG0607	Deltakissen XL	11.11.05.1013
NEG0609	Fersenentlastungsgurt	11.11.05.0012
NEG0610	Seitenlagerungskissen XL	11.11.05.2002
NEG0891	Transporttasche XS	-




strack Patienten- und Pflegebedarf

FERSENFREILAGERUNGSTIEFEL

mit Spitzfußprophylaxe von CareWave

Der **FERSENFREILAGERUNGSTIEFEL MIT SPITZFUSSPROPHYLAXE** wurde entwickelt, um die Fersen vor Dekubitus zu schützen und einer Spitzfußbildung vorzubeugen. Weiterhin bietet der Stiefel den Patienten Komfort und Mobilität.

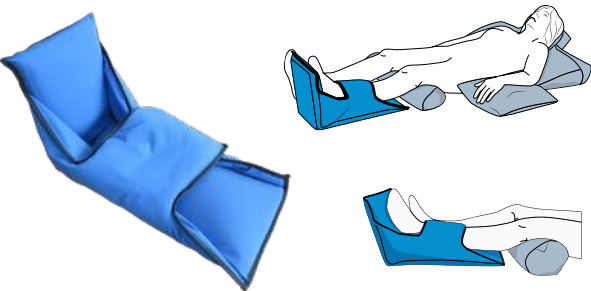


NEG1350 XL 42 x 29 cm

SENSOROLLE

für die Basale Stimulation


Die **SENSOROLLE** wird zur Basalen Stimulation eingesetzt. Sie dient bei bettlägerigen Patienten dazu, einen Verlust der Wahrnehmung des eigenen Körpers vorzubeugen. Die Sensorrolle hilft den eigenen Körper zu spüren und fördert die Wahrnehmung in den Grenzbereichen des Körpers.

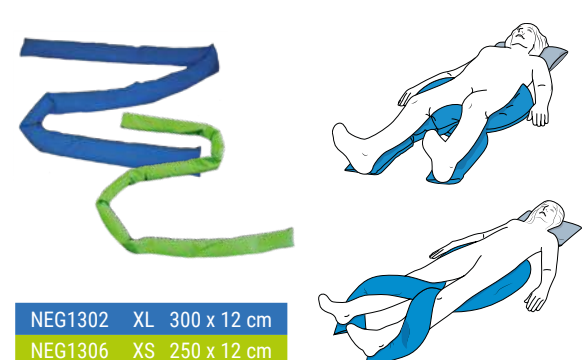

NEG1302 XL 300 x 12 cm
NEG1306 XS 250 x 12 cm

CAREWAVE REVERSO

Lagerungskissen Reverso Produktlinie

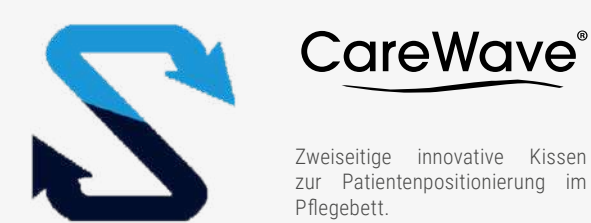

Zweiseitige innovative Kissen zur Patientenpositionierung im Pflegebett.


Hellblau: Seite mit Polystyrol-Kügelchen für schnelle und effektive Positionierung

Dunkelblau: Seite mit Schaumstoff für maximalen Komfort

SEITENLAGERUNGSKISSEN R

HMV-Nummer: 11.11.05.2002

Dieses Kissen passt sich perfekt an die jeweilige Körperregion an. Anwendung vor allem in der seitlichen Lagerung. Das Kissen ermöglicht die volle Unterstützung des Körpers, von Kopf bis Fuß.

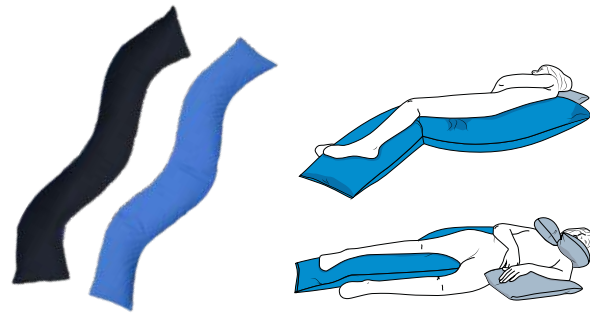

NEG1405 XL 200 x 35 cm

FITLEG EVO / FITLEG XL + XS

- Das Kissen bietet – durch die Verwendung von viscoelastischem Schaumstoff mit Einschnitten im Auflagebereich – eine verbesserte Führung und Weichlagerung der unteren Extremitäten und eine Reduktion der Scher- und Reibungskräfte in diesem Bereich.
- Die Freilagerung der Ferse ermöglicht eine effiziente Druckentlastung in diesem Bereich und unterstützt die Stabilisierung des Patienten in seiner Liegeposition.
- Die Variante CareWave **FITLEG Evo** verhindert durch die Verwendung eines Trennelementes im medialen Teil die Adduktion der unteren Extremitäten und wirkt somit dekubitusprophylaktisch.



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm
774429	CareWave FITLEG XL	58 x 55 x 12
777398	CareWave FITLEG XS	58 x 40 x 12
774430	CareWave FITLEG Evo	58 x 55 x 12

UNIVERSALLAGERUNGSSET

HMV-Nummer: siehe Tabelle

Hinweise zu den jeweiligen Kissen: siehe Einzelproduktbeschreibungen.



Bestellnr.	Bezeichnung	HMV-Nr.
NEG2018	Universallagerungsset – 3-teilig	-

bestehend aus:

NEG0605	Universalkissen XL	11.11.05.0011
NEG0881	Universalkissen XS	11.11.05.0011
NEG0610	Seitenlagerungskissen XL	11.11.05.2002

UNIVERSALKISSEN R

HMV-Nummer: 11.11.05.0011

Das **UNIVERSALKISSEN** passt sich perfekt an die jeweilige Körperregion an. Man kann es z. B. als Waden-, Kopf- oder als Armlagerungskissen bei Hemiplegikern verwenden.




NEG1407 XL 60 x 40 cm

HALBMONDKISSEN R

HMV-Nummer: 11.11.05.1014


Das **HALBMONDKISSEN** dient der erhöhten Lagerung von Kopf, Rumpf, Schultern und der oberen Extremitäten. Es kann ebenso zur Unterfütterung des Kniebereichs sowie zur Entlastung des Gesäß- und Kreuzbeinbereichs eingesetzt werden. In der 30°- und der 135°-Seitenlagerung stützt es sowohl Oberkörper als auch Becken und polstert die Knie.

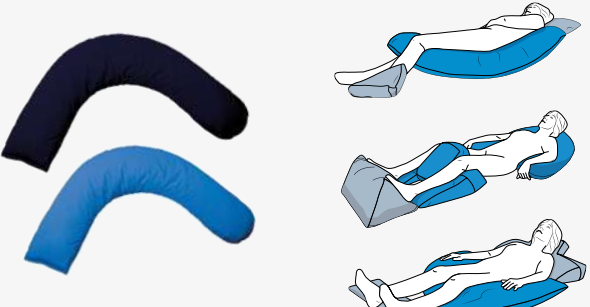

NEG1406 XL 180 x 31 cm

FITLEG SELECT

- Universell einsetzbare Positionierungshilfe durch die Verwendung von fünf zylindrischen Kisselementen, die individuell und variabel an das Grundelement adaptiert werden können.
- Die Kisselemente bestehen aus einer Mikropolystyrolfüllung und sind von einem bi-elastischen, wasserdichten, atmungsaktiven und wischdesinfizierbaren Bezug umgeben.
- Die Positionierungshilfe verhindert sicher sowohl eine unerwünschte Abduktion als auch die Adduktion der unteren Extremitäten.
- Sie bietet die Möglichkeit der expliziten Weich- oder Freilagerung der Ferse zur Dekubitusprophylaxe oder Dekubitustherapieunterstützung.

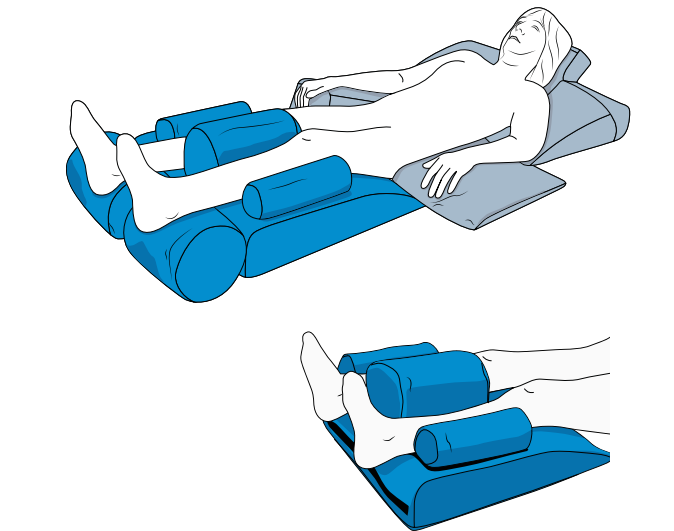

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm
777405	CareWave FITLEG Select	58 x 55 x 12

MIKROLAGERUNG

CareWave

Das CareWave Mikrolagerungskissen dient zur physiologischen Positionsveränderung in den Gelenken sowie unterstützenden Lageveränderung durch Druckverteilung an Kopf, Schultern, Becken und im Fersenbereich.



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm
NEG2017	Mikrolagerungsset	30 x 17 (3 St.)
NEG2016	Mikrolagerungskissen	30 x 17

LENZING FR®

Bezüge zu den CareWave-Artikeln

- Der neuartige **LENZING FR®** ist der textile Bezug mit integriertem Inkontinenzschutz.
- Der Bezug ist dauerhaft schwer entflammbar.
- Die Grundkomponente ist eine Cellulosefaser, die aus dem natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz gewonnen wird.
- Waschbar bis 95 °C.




Der Bezug ist auch für andere CareWave-Artikel in Sonderfertigung lieferbar. Preis auf Anfrage.

ZYLINDERKISSEN R

HMV-Nummer: 11.11.05.0014

Dieses Kissen kann variabel eingesetzt werden, z. B. zwischen den Knien, zur Fersenfreilagerung oder zum Schutz der Knöchel.

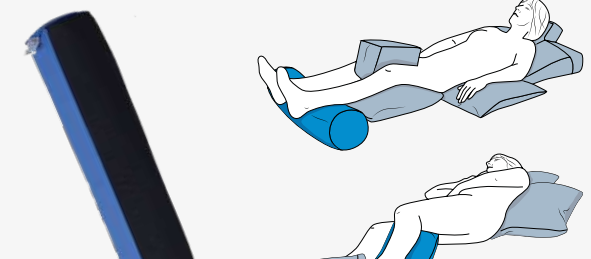

NEG1409 XL 70 x 17 cm

RINGKISSEN R

HMV-Nummer: 11.11.05.0013

Das **RINGKISSEN** dient der Weichlagerung und Stabilisierung des Kopfes und der angrenzenden Halspartie. Der Kopf wird sicher positioniert, so dass die Pflegeperson beide Hände zur Bewegungsförderung des Patienten einsetzen kann.



NEG1408 XL 130 x 20 cm

FITLEG BEINPOSITIONIERUNG BASIS + MODUL

HMV-Nummer: beantragt

- Zweiteiliges Set zur Patientenpositionierung und -stabilisierung im Pflegebett.
- Der Basiskeil ermöglicht eine Entlastung des Sakralbereiches und bietet durch die Ausstattung mit einer rutschfesten Bezugsunterseite eine sichere Patientenpositionierung beispielsweise bei der Anwendung der Herzbettlagerung oder bei einfachen Oberkörperhochlagerungen. Der Patient kann somit in eine lagestabile Sitzposition gebracht werden.
- In Kombination mit dem Unterschenkelmodul wird die Positionierung der kompletten unteren Extremitäten erreicht, die Abduktion gewährleistet und die vollständige Entlastung der Fersen durch Freilagerung ermöglicht.
- Basis + Modul** können auch einzeln eingesetzt werden.



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm
777161	CareWave FITLEG Beinpositionierungsset	58 x 55 x 12
774376	CareWave FITLEG Basiskeil	50 x 21 x 10,5
774381	CareWave FITLEG Unterschenkelmodul	50 x 21 x 10,5