



F5_{Corpus}



Der Kombistuhl der Zukunft, hier und jetzt.

Komfort, Leistung und Stabilität

Der F5 Corpus ist ein langlebiger, kraftvoller und stabiler Elektrorollstuhl mit Vorderradantrieb kombiniert mit dem besten auf dem Markt erhältlichen Sitzsystem – dem Corpus Sitz. Das Sitzsystem wurde entwickelt, um die klinischen, funktionalen und auf den Lebensgewohnheiten beruhenden Bedürfnisse aktiver Benutzer wirkungsvoll zu unterstützen. Die neueste Version des Corpus bietet fünf optionale elektrische Sitzfunktionen. Die Möglichkeit einer programmierbaren Sitzneigung nach vorne ist jetzt eine Standardoption. Bei der Entwicklung des F5 Fahrwerks haben wir großen Wert auf die Feineinstellung der Federung und den Fahrkomfort gelegt. Zusammen mit starken Motoren sorgt dies für eine tolle Leistung und ein stabiles, Vertrauen spendendes Fahrerlebnis.

Eine Reihe von alternativen Bedienteilen für Fahrer, die nicht per Joystick steuern, sind verfügbar, sowie separate Bedienteile für Begleitpersonen und Pflegepersonal.

Zum Transport kann der obere Teil der Rückenlehne abgenommen werden, um die Gesamtgröße des Rollstuhls zu verringern.

permobil

THE POWER OF MOBILITY

elektrische Funktionen



strack Patienten-
und Pflegebedarf



Comfort Ride™

Eine völlig unabhängige Federung in einem präzise ansprechenden Kraftzentrum liefert ein höheres Maß an Komfort und Stabilität, drinnen wie draußen. Das spart Ihre Kraft für die wichtigen Dinge im Leben.

Leistung

Starke neue Motoren in Kombination mit Vorderradantrieb und ESP (Enhanced Steering Performance) verleihen Ihnen Schnelligkeit und Bewegungsfreiheit. Gehen Sie, wohin Sie wollen.

Unabhängigkeit

Durch die Fähigkeit, Sie 35 cm hochzuheben, bietet der AP Sitzlift den Benutzern funktionale Unabhängigkeit und Barrierefreiheit, die ihresgleichen suchen.

Steuerung


Die neuesten Steuerungen für Fahren und zur Positionierung. LCD Farbdisplay mit Speicherfunktionen, Tacho und Uhr.

Farben



sunburst orange radiant red power pink ocean blue titan blue galactic green phantom grey midnight black

Bezüge

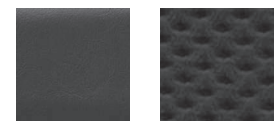

leatherette black fabric

Technische Daten

Gesamtlänge	114 cm
Gesamtbreite	65,5–79 cm
Höhe	96–117 cm
Mindesttransportlänge	82,5/93 cm
Mindesttransporthöhe	82,5 cm
Sitzhöhe	45 cm
Sitzhöhe mit elektr. Sitzhub	45–80 cm
Gewicht inkl. Batterien	186 kg
Gewicht der Batterien	2x23 kg
Höchstgewicht Benutzer	150 kg
Sitzbreite	42–57 cm (in 50 mm Stufen)
Sitztiefe	37–57 cm (in 25 mm Stufen)
Rückenlehnenbreite	36/41/46/51 cm
Rückenlehnenhöhe	47, 54,5–67 cm (in 25 mm Stufen)
Abstand zwischen Armauflagen	38–48/48–58 cm
Rückenlehnenwinkel – verstellbar	120°(manuell), 150° & 180°(elektr.)
Armauflage Höhe	18,5–32 cm

Beinstützenwinkel – verstellbar	90°–180°
Batterieleistung	2 x 73 Ah
Reichweite	25–35 km*
Höchstgeschwindigkeit, vorwärts	12 km/h (Deutschland, HMV: 6 km/h)
Wendekreis (ISO 7176-5)	152,5 cm
Drehen im Korridor	114 cm
Hindernishöhe	70–100 mm
Federung:	Ja
Electronics R-net	120A
Elektrischer Sitzhub:	Ja
Neigungswinkel elektr. verstellbar (nach hinten):	50°
Neigungswinkel elektr. verstellbar (nach vorne):**	10°/20°/45°
Elektr. Beinstützenverstellung	Ja
Elektr. Rückenlehnenverstellung	Ja
Gewährleistung	2 Jahren
ISO 7176-19/ISO 10542-3	Ja – crash-getestet
EN12182/EN12184 CE	Ja

Diese technischen Daten sind abhängig von der Ausstattung des Rollstuhls. Für weitere Informationen, die in diesem Datenblatt nicht aufgeführt sind, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung, die auf der Permobil Website heruntergeladen werden kann, oder kontaktieren Sie die Permobil Zentrale in Ihrem Land.
*Das Spektrum kann eingegrenzt werden, wenn der Rollstuhl häufig an Hängen, auf unebenem Untergrund oder zum Hochsteigen von Bordsteinkanten genutzt wird.

**Extra Sicherheitsvorschriften können nötig sein.

strack Patienten- und Pflegebedarf

F5CORPUS.20150112.DE

permobil

THE POWER OF MOBILITY