



HEPRO
-easy life

Länger zu Hause wohnen!

HALTESTANGE GRIPO - erleichtert den Alltag



strack Patienten-
und Pflegebedarf


Funktionelle Hilfsmittel für mehr Lebensqualität.

Ein System - unzählige Möglichkeiten

HALTESTANGE GRIPO - eine sichere Stütze im Alltag

Gripo ist eine solide und flexible Stütze, die beim Aufstehen und bei Bewegungen zu Hause Sicherheit gibt. Gripo passt in die meisten Häuser und Wohnungen und ist sehr leicht zu montieren. Die Stützstange kann problemlos alleine eingesetzt oder mit nützlichen Zubehören ergänzt werden.

- Stützt, wenn Sie es brauchen
- Nützt die Ressourcen des Benutzers
- Leicht zu montieren, zu versetzen und zu demontieren
- Montage ohne Schrauben, Nägel und Werkzeug
- Große Auswahl an nützlichem und flexiblem Zubehör
- Unzählige Anwendungsbereiche

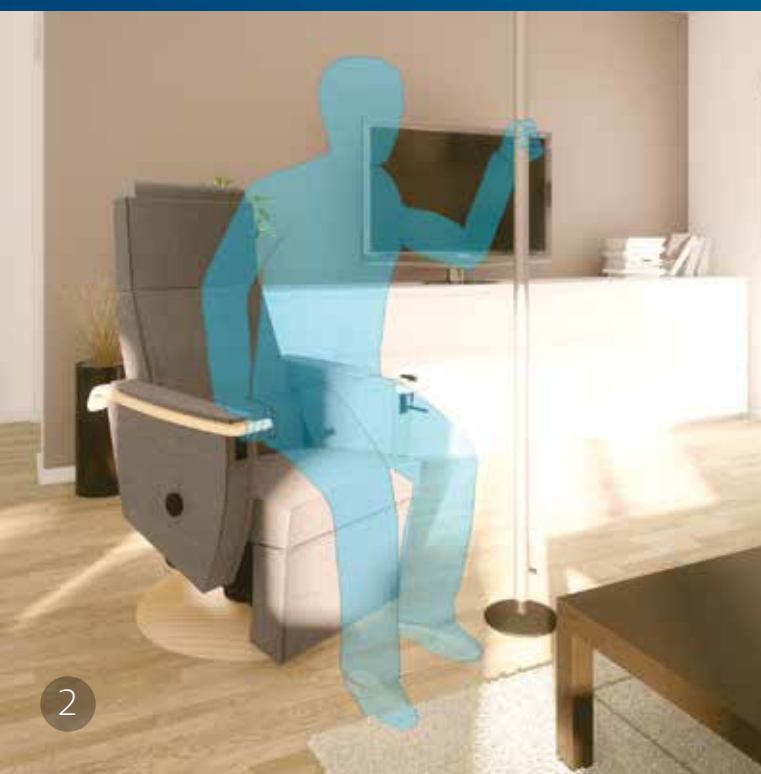

Haltestange Gripo

Art. Nr. 35 100





Griffbügel Triangel

mit Moosgummi und Universalanschluss.

Art. Nr. 35 145



- Bei Montage in der richtigen Höhe auch als Kopfstütze einsetzbar.



Beidhändiger Griff

Länge 47 cm, mit Moosgummi und Universalanschluss.

Art. Nr. 35 159



- Erleichtert das Aufstehen aus einem Stuhl/Bett.
- Erleichtert Bewegungen in den/aus dem Rollstuhl.
- Bei Einsatz von zwei bis drei Griffen in unterschiedlicher Höhe kann der Benutzer anhand des Klettereffekts das Stehen trainieren.
- Befestigt man den Universalanschluss etwas lockerer, kann der Benutzer sich um die Stange bewegen. Wichtig, damit der Benutzer sich von der Bett-/Stuhlkante entfernen kann.




Mini-Griff, senkrecht

Rohrdurchmesser 22 mm,

Länge 75 cm, mit 2 Universalanschlüssen

Art. Nr. 35 158

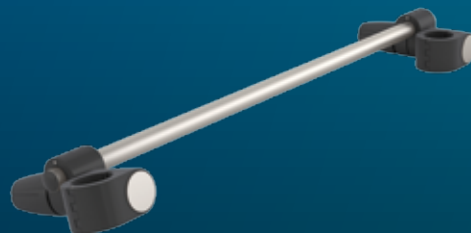




Stützbügel mit Hängegriff

mit 2 Universalanschlüssen, Hängegriff mit Moosgummi und Halteriemen (max. Körpergewicht 110 kg).

Art. Nr. 35 148

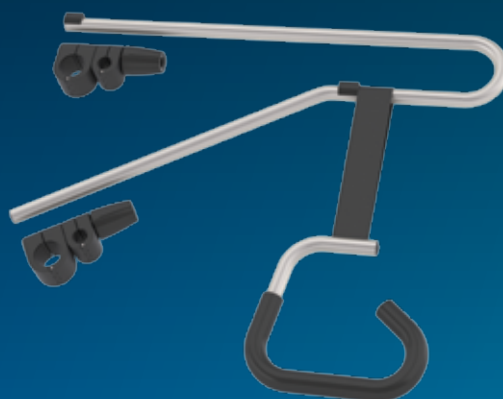

Vorteile des Stützbügels:

- Stützt dort, wo es erforderlich ist.
- Gibt ein Gefühl der Sicherheit.
- Entlastet Pflege-/Hilfspersonal und kann dadurch Belastungsschäden mindern.
- Aktiviert den Benutzer und regt den Kreislauf an.
- Unterstützt bei Lage- und Haltungsänderungen im Bett.
- Spart Kosten, da der Benutzer und seine Angehörigen viele Tätigkeiten ohne Unterstützung durch Pflegepersonal bewältigen können.

Abb.: In Kombination mit Griffbügel Triangel Art. Nr. 35 145



Stützbügel

mit 2 Universalanschlüssen und Gleitstoppfen (max. Körpergewicht 110 kg)

Art. Nr. 35 196



- Stütze beim Aufstehen und bei Bewegungen, z. B. auf der Toilette.



Geländerrohr Durchm. 40 mm

Länge 75 cm, Universalanschlüsse sind getrennt zu bestellen.

Art. Nr. 35 150



Montage zwischen 2 Stützen in niedriger Höhe.

- Stützt den Benutzer mit zusätzlicher Hilfe beim An- u. Ausziehen.
- Ermöglicht Benutzern mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, sich selbst an- und auszuziehen.



Universalanschluss

für Rohrdurchmesser 40 mm.

Art. Nr. 35 169



Ermöglicht, das Zubehör in unterschiedlichen Winkeln zu verriegeln.

Universalanschluss mit Gelenk

für Rohrdurchmesser 40 mm.

Art. Nr. 35 166



Ermöglicht, das Zubehör in unterschiedliche Winkel zu drehen.

Universalanschluss mit Aufnahme

für Rohrdurchmesser 40 mm.

Art. Nr. 35 167



Zum einfachen Heben und Senken des Geländerrohrs.



Geländerrohr Durchm. 22 mm

Länge 75 cm, Universalanschlüsse sind getrennt zu bestellen.

Art. Nr. 35 149



Wandbefestigung

für Rohrdurchmesser 22 mm, in die Wand zu schrauben.

Art. Nr. 35 156





Kombi-Griff

mit 2 Universalanschlüssen

Art. Nr. 35 208



- Guter Griff für beide Hände für Anwender mit großen Händen.
- Solider und sehr stabiler Griff (verdreht sich nicht).
- Mehrere Griffe in verschiedenen Höhen einsetzbar (Kletterfunktion).
- Beim An-/Ausziehen kann der Benutzer sich auf den Griff lehnen.



Rechteckiger Tisch

mit Universalanschluss, 41x31 cm

Art. Nr. 35 165



- eignet sich auch gut als PC-Tisch.



Klappsitz

mit Universalanschluss

Größe: T 40 cm x B 36 cm

(max. Körpergewicht 110 kg)

Art. Nr. 35 154





Geländerrohr Durchm. 22 mm

Länge 75 cm, mit Moosgummi

Universalanschlüsse sind getrennt zu bestellen.

Art. Nr. 35 151



- Kann schräg montiert werden, z. B. als Geländer einer kleinen Treppe oder bei Höhenunterschieden.
- Montage im Bad, am Waschtisch oder an der Toilette zwischen zwei Stangen.



Geländerrohr Durchm. 40 mm

Länge 160 cm, Universalanschlüsse sind getrennt zu bestellen.

Art. Nr. 35 152



- Montage als Haltestange zwischen zwei Stützen.
- Für Zimmer mit hoher Schwelle, zu denen beispielsweise für Rollstuhlfahrer kein Zugang möglich ist.
 - Haltestange z. B. zwischen Bett und Toilette, im Flur o. ä. trägt zur Unabhängigkeit des Benutzers bei.
 - Mehrere können zu einer langen Haltestange zwischen mehreren Stützen montiert werden.



„Lebensqualität ist, so lange wie möglich zu Hause wohnen zu können“

- Der richtige Einsatz der Haltestange Gripo mit unterschiedlichem Zubehör kann in vielen Fällen dazu beitragen, dass Menschen länger zu Hause wohnen können.

Übersicht über das Gripo-Sortiment

ART. NR.	ARTIKEL
35 100	Haltestange Gripo für Deckenhöhe 210 - 300 cm
35 202	GRIPO KANN ALS SPEZIALANFERTIGUNG IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN GELIEFERT WERDEN:
35 105	Gripo Spezial, für Deckenhöhen unter 210 cm Gripo Lang, für Deckenhöhe 260 - 320 cm
35 169	Universalanschluss für Rohrdurchmesser 40/40 mm
35 199	für Rohrdurchmesser 22/22 mm
35 130	für Rohrdurchmesser 40/22 mm
35 166	Universalanschluss mit Gelenk
35 160	für Rohrdurchmesser 40 mm für Rohrdurchmesser 22 mm
35 167	Universalanschluss mit Aufnahme
35 161	für Rohrdurchmesser 40 mm für Rohrdurchmesser 22 mm
35 157	Wandbefestigung
35 156	für Rohrdurchmesser 40 mm für Rohrdurchmesser 22 mm
35 148	Stützbügel mit Hängegriff Stützbügel mit 2 Universalanschlüssen, Hängegriff mit Moosgummi und Halteriemen (max. Körpergewicht 110 kg)
35 196	Stützbügel mit 2 Universalanschlüssen und Gleitstopperrn (max. Körpergewicht 110 kg)

	ART. NR.	ARTIKEL
	35 171	Hängegriff mit Moosgummi und Halteriemen
	35 145	Griffbügel, Triangel mit Moosgummi, mit Universalanschluss
	35 159	Beidhändiger Griff Länge 47 cm, mit Moosgummi, mit Universalanschluss
	35 158	Mini-Griff, senkrecht Länge 75 cm, Durchm. 22 mm, mit 2 Universalanschlüssen
	35 208	Kombi-Griff mit 2 Universalanschlüssen
	35 149	Geländerrohr Länge 75 cm, Durchm. 22 mm
	35 151	Länge 75 cm, Durchm. 22 mm, mit Moosgummi
	35 150	Länge 75 cm, Durchm. 40 mm
	35 152	Länge 160 cm, Durchm. 40 mm
	35 154	Klappsitz mit Universalanschluss (max. Körpergewicht 110 kg)
	35 165	Tisch, rechteckig 41 x 31 cm, mit Universalanschluss

ART.NR

ARTIKEL



35 198
35 201

WC-Papierhalter

mit Universalanschluss 22/22 mm
mit Universalanschluss 40/22 mm



35 174

Obere Deckenabschlussplatte für Schrägdach
einstellbar




35 153

Obere Deckenabschlussplatte für schwache Decken

große obere Abschlussplatte, Ellipse 70 x 31 cm,
für schwächere Decken, z.B. Gipsdecken (s. mittlere Abb. unten)

Montagebeispiele für schwache Decken

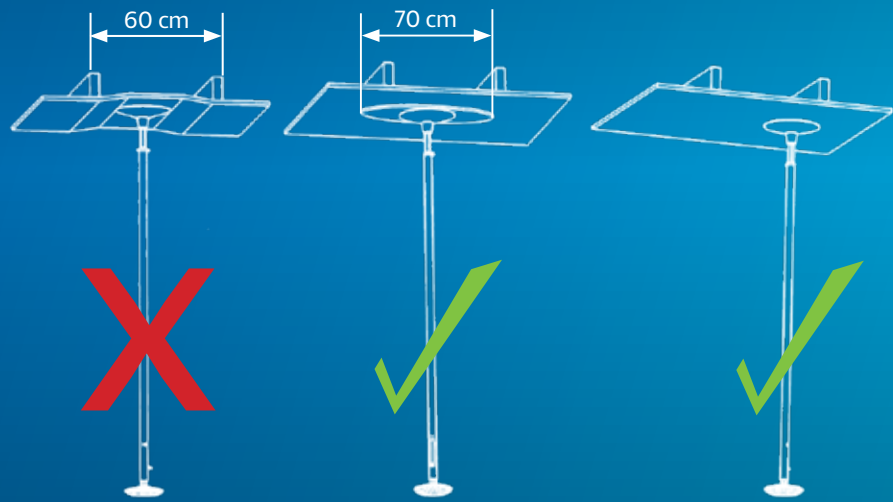

Falsch

Verwenden Sie die große obere
Deckenabschlussplatte

Richtig

Haltestange Gripo

Material

Aluminium und Kunststoff

Anforderungen an Deckenhöhe

Min. 210 cm - max. 300 cm

Max. Belastung

100 kg, horizontal in Stangenmitte

Körpergewicht

Max. 150 kg

Produkt-Eigengewicht

4,5 kg, ohne Zubehör

Dort, wo Gripo montiert werden soll, muss die Deckenkonstruktion für eine punktuelle Belastung von 100 kg geeignet sein (gilt für alle Deckenabschlussplatten).

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch

Vertrieb:

PROMEFA AG
Steinackerstrasse 7
CH-8180 Bülach
Tel. +41 (0)44 872 97 79
Fax +41 (0)44 872 97 83
E-Mail: promefa@promefa.ch
Web: www.promefa.ch
vip.promefa.ch

Funktionelle Hilfsmittel für mehr Lebensqualität.

PROMEFA

Revision Nr. 1 - 2016

HEPRO 
-easy life