


strack Liftsysteme

FLIESENDE
BEWEGUNG

FLOW X

ACCESS

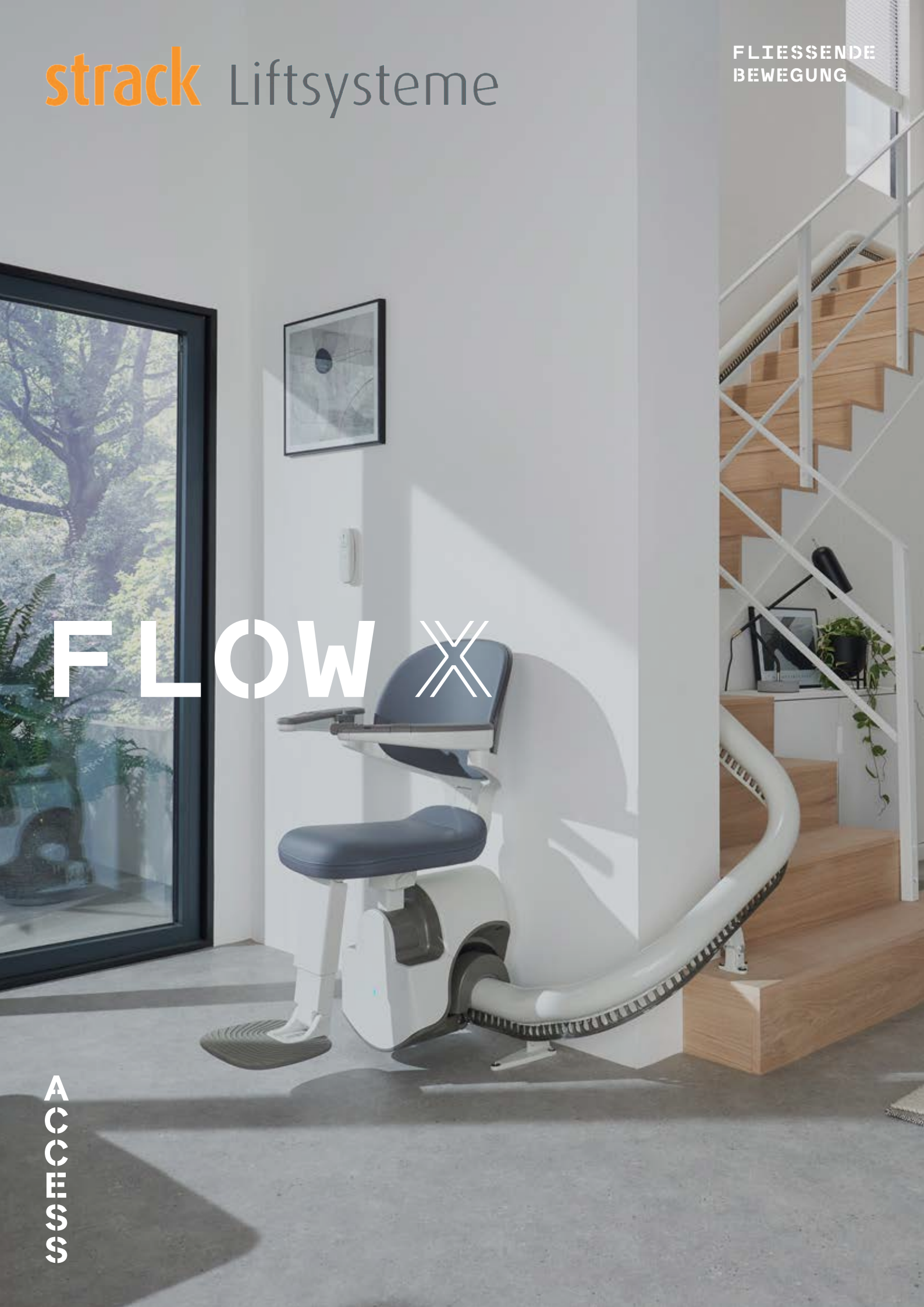

Der Flow X ist nicht nur fließend in seiner Bewegung, sondern bietet darüber hinaus ein außergewöhnliches Maß an Komfort, Sicherheit und Präzisionsarbeit.

Unser Raumwunder, der Flow X, fügt sich nahtlos in Ihr Zuhause ein. Der Flow X wird auf der Treppe und nicht an der Wand angebracht und lässt sich somit schnell, effizient und mit minimalen Störungen in Ihrem Zuhause installieren.

02

**DER FLOW X, EINE
KOMBINATION AUS
INNOVATION UND
FUNKTIONALITÄT,
IST UNSER
UMFASSENDSTER
EINROHRSCHIENEN -
KURVENTREPPENLIFT**



03

99

Der Flow X befördert mich sanft die Treppe hinauf und hinunter und hat mir das Leben sehr erleichtert. Noch dazu fügt er sich wundervoll in mein Zuhause ein. Ich kann ihn absolut weiterempfehlen!“

1

KOMFORT

Der Flow X definiert höchsten Komfort neu. Er bietet ergonomische und innovative Funktionen, die alle im Detail auf Sie zugeschnitten sind. Der gepolsterte Sitz ist speziell mit einer sanften Rückenlehne ausgestattet. In Kombination mit dem höhenverstellbaren Sitz und der Fußstütze wird somit eine natürliche, bequeme und auf Sie zugeschnittene Sitzposition gefördert.

Der für einfaches Wohnen konzipierte Flow X ist mit einer vollständig automatischen Klappfunktion

auf Knopfdruck erhältlich. Dank dieser einzigartigen Funktion kann der Flow X seine Arbeit erledigen, während Sie bequem sitzen und seine Vorteile von Anfang bis Ende genießen können.

Erleben Sie den Komfort des Flow X und wählen Sie aus unserer Kollektion an zeitgenössischen, hochwertigen Stoffen und Ausführungen aus, um Ihren Aufzug vollständig an den Stil Ihres Zuhauses anzupassen.

**2**

SICHERHEIT

Der Treppenlift Flow X wurde nach den höchsten Standards entwickelt und getestet (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 81-40), so dass Sie sich mit absoluter Sicherheit in Ihrem Zuhause bewegen können.

Die innovativen Armlehnen des Flow X bieten mehrere wichtige Vorteile. Sie haben eine ergonomisch verjüngte Form, die Ihnen sowohl beim Aufstehen als auch beim Hinsetzen zusätzlichen Halt bietet. Dank der einzigartigen, frei zugänglichen Armlehnenposition war das Umsteigen in einen Treppenlift noch nie so einfach. Darüber hinaus verhindert die intelligente Erkennungsvorrichtung

in den Armlehnen jegliche Bewegung, wenn sich die Armlehnen nicht in der richtigen Position befinden, was für absolute Sicherheit sorgt. Während der Fahrt bieten Ihnen die Einhandbedienung des Sicherheitsgurts und die umschließenden Armlehnen des Flow X Sicherheit. Und dank der farbcodierten Kontrollleuchten haben Sie die Kontrolle und immer die Gewissheit, dass Ihr Lift korrekt funktioniert.

Der Flow X hat eine optionale, integrierte Rufvorrichtungsfunktion (bis zu drei Nummern programmierbar), um sicherzustellen, dass Sie mit Freunden und Familie in Verbindung bleiben können, wenn Sie den Lift benutzen.

3

PRÄZISIONSARBEIT

Der Flow X ist unser umfassendster Kurventreppenlift. Er wurde von Pearson Lloyd mit dem Ziel entworfen, Innovation mit einem inspirierenden zeitgenössischen Design zu verbinden.

Wenn Sie sich für die Präzisionsarbeit von Flow X entscheiden, dann erhalten Sie einen Lift, der auf Sie und Ihr Zuhause zugeschnitten ist. Sie erhalten einen eleganten, zeitgemäßen Lift mit in Ihrem

Sinne entworfenen Optionen, bei dem alle mechanischen Elemente elegant außer Sichtweite bleiben. Sie profitieren von unserem umfassendsten Lift mit unserem großzügigsten und komfortabelsten Sitzdesign. Genießen Sie eine ruhige und sichere Fahrt, denn unsere ASL-Technologie hält den Flow X perfekt waagrecht, während er sich während der Fahrt dreht, ideal für Treppen mit einer Breite von nur 610 mm.

Der Flow X ist mit der neuesten Technologie ausgestattet und lässt sich an beinahe jeder Treppe montieren. Unsere „Advanced Swivel & Levelling Technology (ASL; fortschrittliche Dreh- und Ausrichtetechnologie)“ ermöglicht die Montage an Treppen mit einer Breite von nur 610 mm. Diese für den Flow X einzigartige Funktion ermöglicht es Ihrem Treppenlift, sich während der Fahrt zu drehen, und macht ihn deshalb zu einem der vielseitigsten Treppenlifte der Welt.

04



05



**WENN DER FLOW X
EINGEKLAPPT WIRD,
BLEIBEN ALLE
MECHANISCHEN
ELEMENTE ELEGANT
AUßER SICHTWEITE**





08

ASL TECHNOLOGIE

Unsere einzigartige ASL-Technologie ermöglicht es dem Treppenlift Flow X, sich zu drehen und während der Fahrt perfekt waagrecht zu bleiben. Durch das Drehen während der Fahrt befinden Sie sich immer in der sichersten und bequemsten Position.

09



1

Der Sitz befindet sich immer in der richtigen Position, um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleisten.

Der Flow X dreht sich während der Fahrt, so dass das Ein- und Aussteigen in den bzw. aus dem Lift an jedem Ende der Treppe schnell und einfach ist. Am oberen Ende der Treppe kann sich der Sitz von der offenen Treppe wegdrehen und dadurch einen sicheren Ausstieg aus dem Sitz gewährleisten.

2

Ständig darauf bedacht, Ihnen Zeit zu sparen und für Sicherheit und Komfort zu sorgen.

Die ASL-Technologie funktioniert, während der Lift in Bewegung ist. Deshalb vermeiden Sie zusätzliche Stopps und Drehbewegungen zu Beginn, während, und am Ende der Fahrt. Das spart Zeit und sorgt für zusätzliche Sicherheit und zusätzlichen Komfort. Der Lift bewegt sich tatsächlich in einem „Flow“ (fließend).

3

Interne oder externe Schiene an der schmalsten und steilsten Treppe.

Selbst in Fällen, wenn die Treppe eng und steil ist, kann der Flow X näher an der Stufe, auf jeder Seite der Treppe, angebracht werden. Hierdurch ist der Treppenlift weniger aufdringlich und das Treppenhaus bleibt für weitere Treppenhausnutzer weiterhin zugänglich.

4

Einzigartige Technologie, die man nur im Flow X findet.

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig – wenn Sie die ASL-Technologie wählen, dreht sich die Fußstütze mit dem Sitz, um sicherzustellen, dass Ihre Beine und Füße in einer natürlichen und bequemen Position bleiben, um keine zusätzliche Belastung für Ihre Gelenke zu schaffen.

10



11

OPTIONEN

ES GEHT NUR
UM SIE

Wenn Sie sich für den Treppenlift Flow X entscheiden, stellen Sie die beste Lösung für Ihr Zuhause sicher. Mit einer einzigen diskreten Schiene kann dieser Treppenlift maßgefertigt und an jede Treppe angepasst werden.

SCHIENE



Standard-Steilfahrt

Das Standard-Schienenende ist die perfekte Lösung, wenn es am unteren Ende der Treppe ein Hindernis gibt, wie beispielsweise eine Tür. Das Schienenende erfordert nur 175 mm Platz vor der untersten Stufe.




Vertikaler 'Kurzstart'

Wenn der Platz am unteren Ende noch begrenzter ist, kann das 'Kurzstart'-Schienenende angebracht werden, das nur 100 mm Platz vor der untersten Stufe benötigt.



Horizontaler Auslauf

Wenn Sie am unteren Ende der Treppe zusätzlichen Platz haben, kann der Flow X dank des horizontalen Auslaufs etwas entfernt von der untersten Stufe geparkt werden.

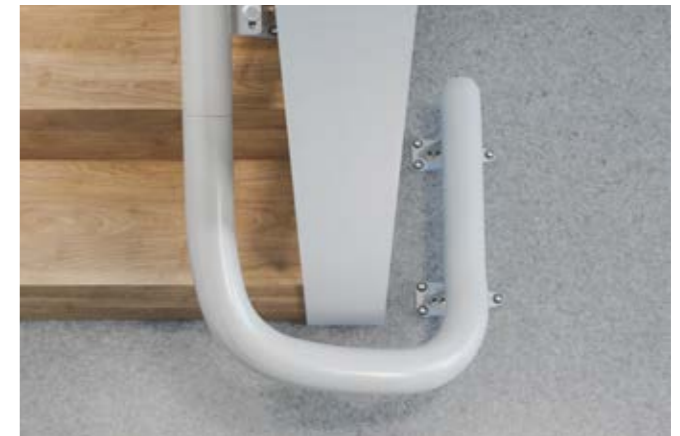

Parkkurve

Eine Parkkurve ermöglicht es, den Flow X abseits der Treppe zu parken.

FARBE



Steingrau

RAL 7030



Weiß

RAL 9002



Blassbraun

RAL 8025



Dunkelbraun


RAL 8019

POLSTERKOLLEKTION


Vinyl




Naturbeige

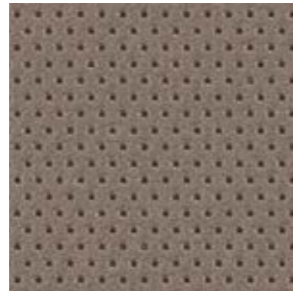

Basaltgrau

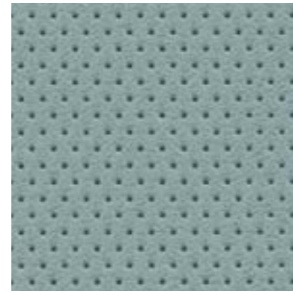


Perlblau

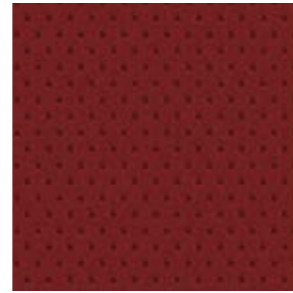


Dunkelrot


Stoff

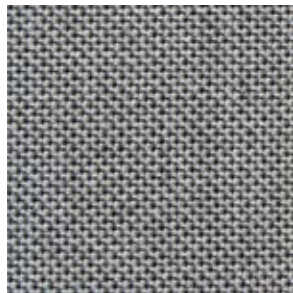

Felsgrau

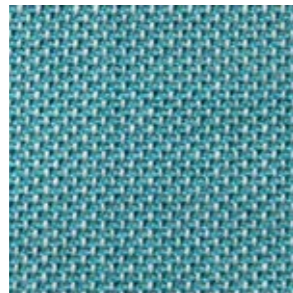

Mineralblau

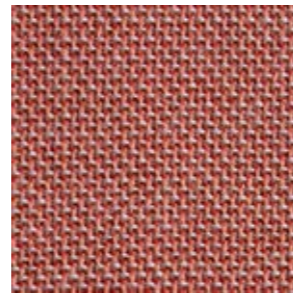


Korallenorange

14


Leder



Firenze-Smoke

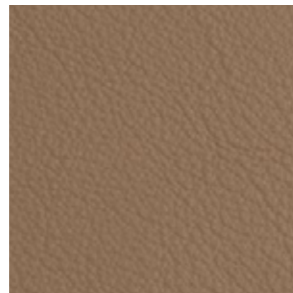


Firenze-Hellbraun

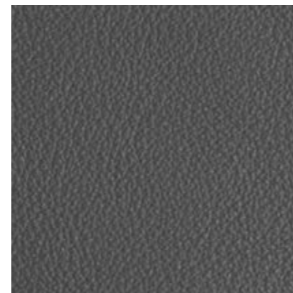

Firenze-Grau

Holz

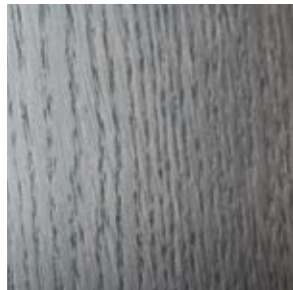

Eichengrau

Dank unserer Kollektion an hochwertigen Stoffen und dank der vielseitigen Ausführungen lässt sich der Flow X mühelos in Ihr Zuhause einfügen.

ARMLEHNNEN & SITZGURT



Gerade



Rund



Offen



Ergonomischer Sitzgurt

15

JOYSTICK



Der integrierte Joystick ist mit einem bequemen Soft-Touch-Griff ausgestattet und so konzipiert, dass er bei Nichtgebrauch ordentlich in die Armlehne eingeklappt werden kann.

RUFVORRICHTUNG



Blieben Sie mit Freunden und Familie in Verbindung – mit bis zu drei verschiedenen Telefonnummern, die Sie direkt von Ihrem Treppenlift aus erreichen können.



16

VOLLSTÄNDIG AUTOMATISCHE KLAPPBARE ELEMENTE

Die Benutzung eines Treppenlifts war dank der vollständig automatischen Ausklappfunktion des Flow X auf Knopfdruck noch nie so einfach. Eine einzigartige Funktion, die nur beim Flow X verfügbar ist.

Wählen Sie zwischen einem vollständig automatisch klappbaren Sitz oder einer vollständig automatisch klappbaren Fußstütze oder unserer innovativen, manuell klappbaren Version. Die fließende Bewegung der manuellen Klappbewegung wird durch eine integrierte Gasfeder unterstützt, die diskret im Sitz verborgen ist.



RUFEN UND PARKEN

SIE HABEN DIE KONTROLLE

Über intuitive Fernbedienungen unten sowie oben des Treppenhauses kann Ihr Lift geholt oder bei Nichtbenutzung zur Parkposition geschickt werden. Mit einem modernen Design für die Handbedienung und einer klaren Statusanzeige, die den Treppenlift widerspiegelt, war das Rufen und Parken noch nie so bequem wie heute.



DER FLOW X FÜGT
SICH NAHTLOS IN
IHR DEKOR UND
IHRE MÖBEL EIN




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

NACH HÖCHSTEN STANDARDS ZERTIFIZIERT


SPEZIFIKATION

Geschwindigkeit	Max. 0,15 m/s
Antriebsart	Zahnstangenantrieb
Motor (Watt)	350 W
Tragkraft	125 kg
Automatische Stoppfunktion	Ja
Treppenneigung	Bis zu 72°
Funktion	Armlehnerkennung und klappbare Joystick-Steuerung serienmäßig
Batterien	2 × 12-V-Batterien, insgesamt 24 V
Zertifizierung	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EN 81-40
Modellcode	RP00-CU
Automatische Stoppfunktion	Ja
Fußstütze	Erhältlich in 2 Größen Einstellbar auf 5 Positionen
Sitzhöhe	Einstellbar auf 4 Positionen 515 - 585 mm (vom Boden bis zur Sitzoberkante)

22

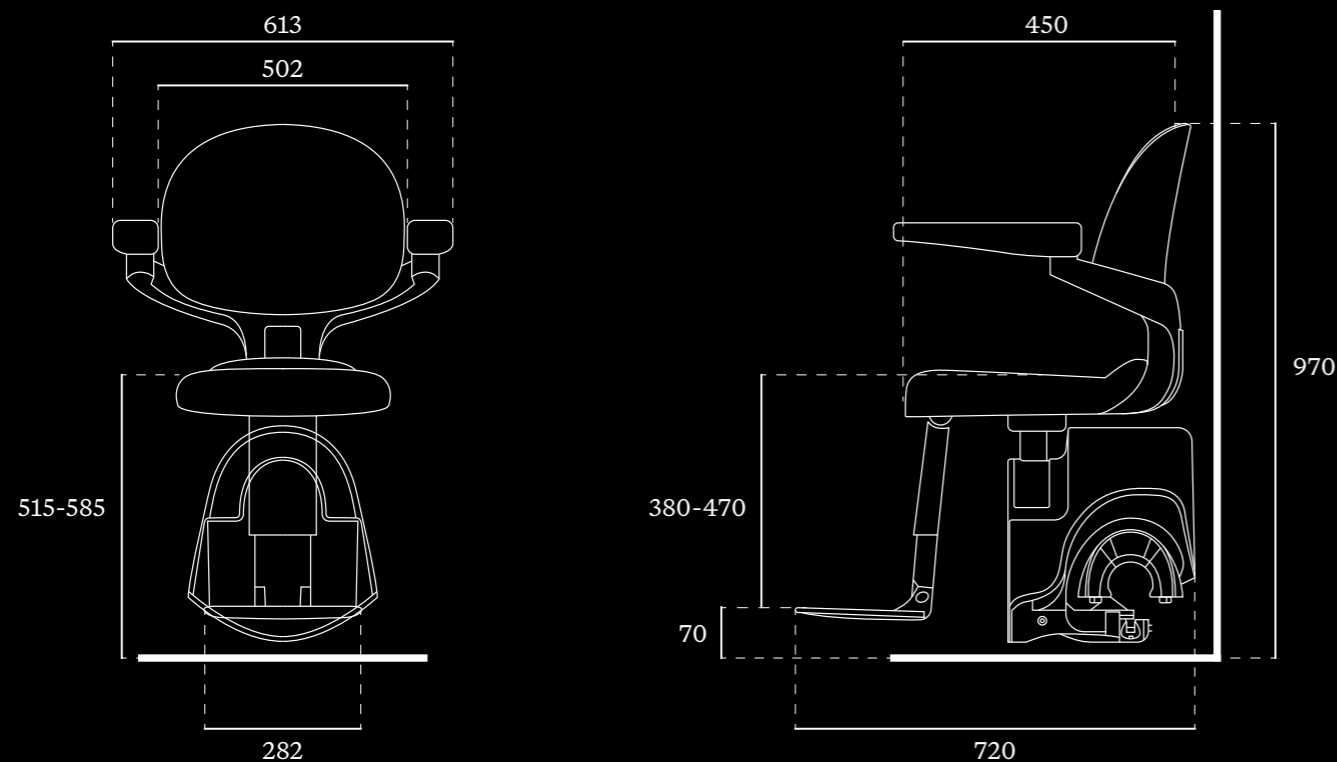

23

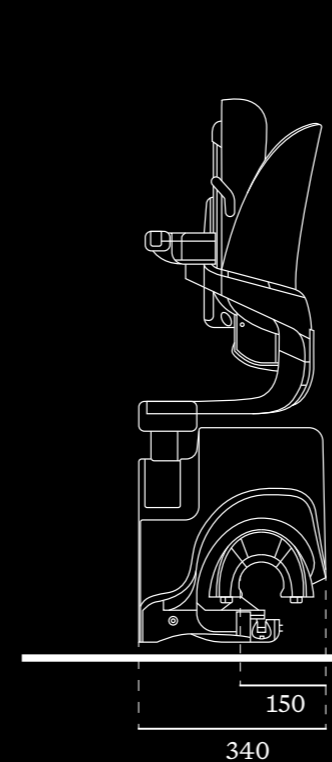

99

Der Treppenlift Flow X besticht durch seine bahnbrechende Technologie. Er gehört zu den zuverlässigsten Produkten, mit denen ich das Vergnügen hatte, zu arbeiten.”

**MIT DEM FLOW X
KANN IHRE TREPPE
WEITERHIN
VON ANDEREN
FAMILIENMITGLIEDERN
WIE GEWOHNT
GENUTZT WERDEN**

24

25



ÜBER ACCESS

Access BDD ist ein Geschäftsbereich von TK Elevator. Wir ermöglichen Menschen auf der ganzen Welt komfortable Bewegung in Gebäuden durch ein Angebot von Treppenliften, Plattform- sowie Homeliften, die wir über ein Netzwerk von sorgfältig ausgewählten Geschäftspartnern vertreiben. Wenn Sie sich für einen Homelift von Access BDD entscheiden, erhalten Sie ein qualitatives Spitzenprodukt, das durch fachmännischen Service und Rat unterstützt wird.

26

Unsere Partner sind allesamt Spezialisten für Mobilitäts- oder Liftprodukte und erhalten umfangreiche technische und kaufmännische Schulung über unsere Produkte. Ihr Access BDD-Partner führt sie durch die Produktoptionen, um Sie dabei zu unterstützen, einen Homelift auszuwählen, der Ihre Anforderungen erfüllt und Ihrer Umgebung entspricht. Darüber hinaus erhalten Sie ebenfalls fachmännischen Rat, um sicherzustellen, dass Ihr neuer Homelift alle relevanten Richtlinien in Bezug auf Zugänglichkeit und Sicherheit erfüllt.

Unsere Produkte sind für einfache Montage und Wartung konzipiert, deren Abwicklung vollständig durch Ihren Access BDD-Vertragspartner erfolgt.



**WIR BIETEN
AUSGEWÄHLTEN
PARTNERN AUF
DER GANZEN
WELT LÖSUNGEN
FÜR TREPPEN - ,
PLATTFORM - UND
HOMELIFTE**

27

Access BDD ist
einer der führenden
europäischen Anbieter
von Treppenlift-,
Plattformlift- und
Homelift-Lösungen



Scannen Sie und
sehen Sie sich unser
Flow X-Video mit
Kundenerfahrungen an.

Ihr lokaler Access BDD-Partner ist:

strack Liftsysteme

Strack AG Tel. 0800 600 500 www.strack.ch ZSR-Nr. K 7514.14
Ebnatstrasse 125 Fax 0800 600 900 info@strack.ch NIF-Nr. 366 824
8200 Schaffhausen MWST-Nr. 567 970

