

HomeGlide

Der neue
HomeGlide
Extra



ZIMMERSERVICE

Die perfekte Lösung für gerade Treppen

Seit mehr als 60 Jahren profitieren Menschen mit eingeschränkter Mobilität von der Zuverlässigkeit unserer Treppenlifte und der neu gewonnenen Bewegungsfreiheit. Die beiden Treppenlifte HomeGlide und der neue HomeGlide Extra bieten eine Lösung für fast alle geraden Treppen und sind dazu auch noch günstig im Preis.

HomeGlide

Mit HomeGlide und HomeGlide Extra überwinden Sie mühelos Ihre Treppe. Erfüllen Sie sich ein unabhängiges und aktives Leben durch einen HomeGlide Treppenlift. Bewegen Sie sich komfortabel und sicher zwischen allen Etagen Ihres Hauses. Genießen Sie Ihre neue Bewegungsfreiheit, Sie haben es sich verdient!



Der neue HomeGlide *Extra*

Der neue HomeGlide Extra bietet Ihnen die Funktionalität und Zuverlässigkeit des HomeGlide und darüber hinaus zahlreiche interessante Zusatzoptionen und ein neues Stuhl-Design in vielen Farben. Der HomeGlide Extra ist damit eine gelungene Kombination aus elegantem Design, innovativer Technik und Funktionalität.



HomeGlide

Ergonomisches Design und einfacher Einbau

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten und Treppenlift-Benutzern, ist der Treppenlift HomeGlide der Lift der Zukunft und wird damit ganz besonderen Ansprüchen gerecht.

Die clevere Konstruktion des HomeGlide ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Einbau in Ihrem Eigenheim, da die Aluminiumschiene direkt auf den Treppenstufen montiert wird. Bei Einbau erhalten Sie eine persönliche Einführung durch den Techniker, so dass Sie mit der einfachen Handhabung Ihres Treppenliftes sofort vertraut sind.



HomeGlide

Sicherheit & Komfort

Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die Maxime unseres Handelns. Der HomeGlide erfüllt die neuesten und höchsten internationalen Sicherheitsanforderungen, so dass Sie sicher sein können, ein zuverlässiges Produkt zu erhalten.

Um Ihnen das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, hat der HomeGlide einen manuellen Drehsitz mit Sicherheitsgurt in der Grundausstattung. Sicherheitssensoren befinden sich in der Fußstütze. Sollte sich ein Hindernis auf der Treppe befinden, hält der HomeGlide sofort an.

Ein Ein- und Ausschalter ist am Fahrwerk angebracht, so dass Sie den HomeGlide bei Nichtbenutzung über längere Zeit ausschalten können, z.B. in der Urlaubszeit. Das spart Strom und schont die Batterie.



HomeGlide

Flexibilität, die das Leben erleichtert

- **Joystick-Schlüssel-System**

Der HomeGlide ist einfach mit Hilfe eines Joysticks zu bedienen. Mittels einer einfachen Handbewegung setzt sich der HomeGlide in Bewegung. Bei Loslassen des Joysticks stoppt der Lift sofort. Außerdem dient der Joystick gleichzeitig als Schlüssel, denn er ist einfach zu entfernen. Einer unerlaubten Benutzung der Anlage kann somit vorgebeugt werden.



- **Infrarot-Fernbedienung**

Für zusätzlichen Komfort bieten wir den HomeGlide mit zwei Fernbedienungen als Standardausstattung an. Diese handlichen Bedienungen können oben und unten an der Wand angebracht werden. So können Sie den Lift jederzeit herbeirufen. Dies ist besonders praktisch, wenn es mehrere Benutzer im gleichen Haushalt gibt.



- **Automatische Klappschiene**

Der HomeGlide Treppenlift ist selbstverständlich mit einer automatischen Klappschiene erhältlich und bietet somit die Ideallösung für Treppen, wenn sich am Treppenanfang oder -ende ein Hindernis wie z.B. eine Tür befindet. Diese wird mittels der Fernbedienung ein- und ausgeklappt.



Wir präsentieren: *Der neue* **HomeGlide** *Extra*

Elegant und Multifunktional

Mit der Einführung des HomeGlide Extra ist unser Treppenliftangebot noch umfangreicher geworden. Er bietet eine große Auswahl an Optionen, ist elegant und funktional zugleich sowie auch noch erschwinglich im Preis.

Harmonisch: Der Lift passt sich Ihrer Einrichtung an

Der HomeGlide Extra bietet maximalen Komfort und entspricht höchsten Design-Ansprüchen. Mit seiner großen Polsterfarbauswahl lässt sich der HomeGlide Extra individuell Ihrem Wohndesign anpassen. Dank seines kompakten Designs fügt er sich auch auf kleinem Raum dezent ein.





Auswahl

Der neue **HomeGlide** Extra

Eine einzigartige Auswahl an Optionen:

Der HomeGlide Extra hat alle Eigenschaften des HomeGlide sowie die folgenden Zusatzoptionen:

- **Fußstütze und Sitz mit automatischem Klappmechanismus**

Mittels dieser neuen Standardfunktion wird das Fußbrett automatisch zusammen mit dem Sitz ein- und ausgeklappt. Das manuelle Einklappen des Fußbretts ist überflüssig.



- **Kurvige Armlehnen**

Der HomeGlide Extra ist mit kurvigen, klappbaren Armlehnen ausgestattet. Diese Armlehnen dienen der Sicherheit für den Benutzer. Wahlweise können wir selbstverständlich auch gerade Armlehnen anbieten.



- **Automatischer Drehsitz**

Der HomeGlide Extra hat einen manuellen Drehsitz als Standardaustattung. Gönnen Sie sich den Luxus eines automatischen Drehsitzes. Die automatische Drehfunktion erleichtert Ihnen das Ein- und Aussteigen, und Sie erleben einen völlig neuen Komfort. Die Drehfunktion wird mit Hilfe des Joysticks automatisch gesteuert.



- **Erhöhte Tragkraft**

HomeGlide Extra ist für eine Tragkraft von bis zu 146 kg bei einem maximalen Treppenwinkel von 45° ausgelegt.



- **Verstellbare Sitzhöhe**

Erreichen Sie maximalen Sitzkomfort mit 4 Sitzhöhenstellungen. Die Fußstütze befindet sich lediglich 97 mm über dem Boden, um Ihnen den Einstieg einfach und mühelos zu ermöglichen.



- **6 Polsterfarboptionen**

In sechs zeitlosen Farben zur Auswahl passt der HomeGlide Extra perfekt zu dem Dekor in Ihrem Heim.:



Beige



Braun



Blue



Grün



Grau




Rot

HomeGlide Dimensionen

Dimensionen in Millimeter

A	Gesamtbreite	650
B	480
C	Stuhlbreite	425
D	295
E	963 (848 + K)
F	75
G	Stuhl in gerader position.....	35
H	Sitztiefe	415
I	425
J	450 (Ohne Polsterung)
K	115 (94 - 118)
L	620
M	330
N	365 (M + G)

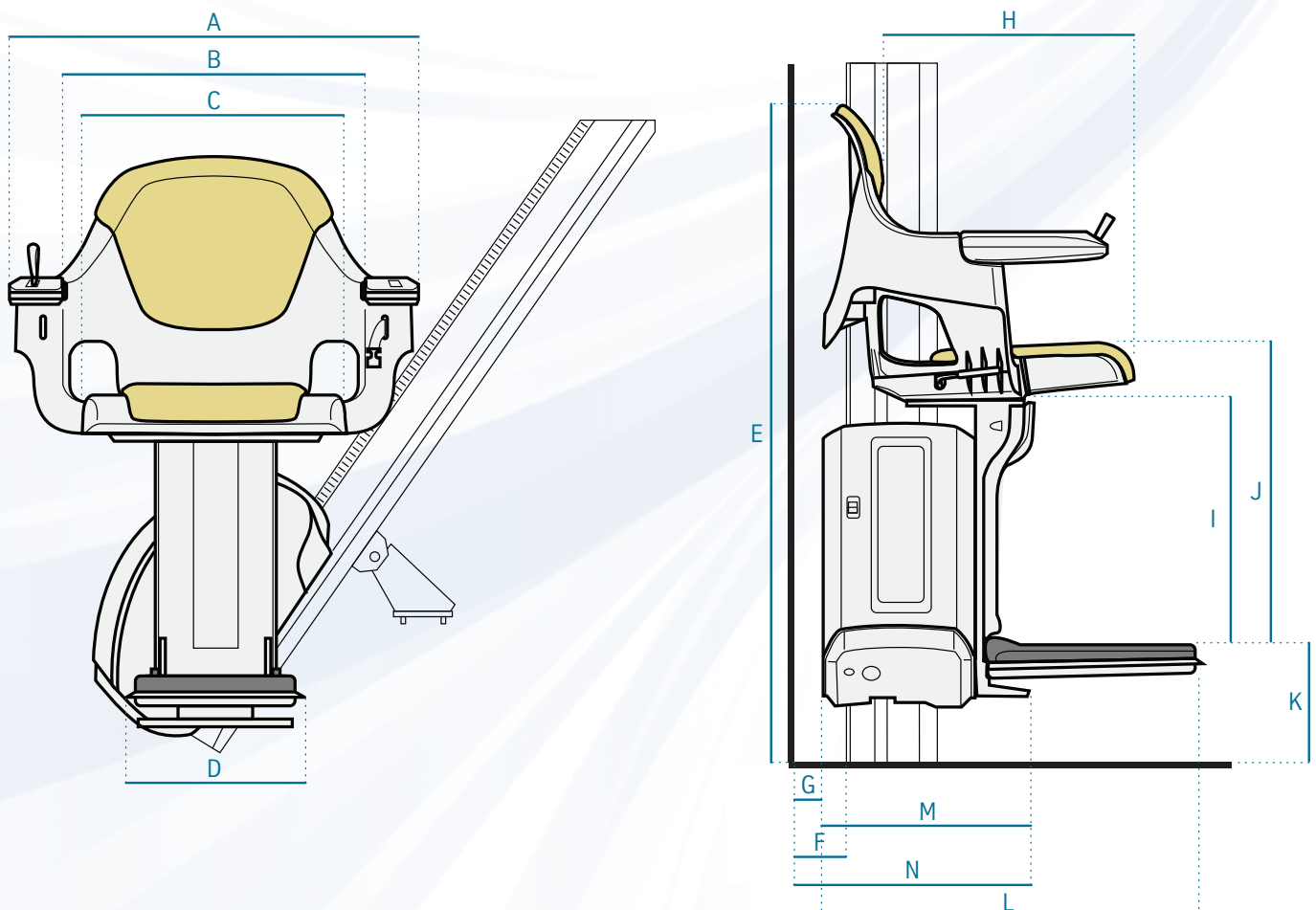


Der neue HomeGlide Extra

Dimensionen

Dimensionen in Millimeter

A	Gesamtbreite	584
B	467
C	Stuhlbreite	320
D	295
E	1017 (902 + K)
F	74
G	Stuhl in gerader position.....	34
H	Sitztiefe	408
I	400
J	471.5 (Ohne Polsterung)
K	115
L	380
M	598
N	632 (M + G) (gedreht 680)

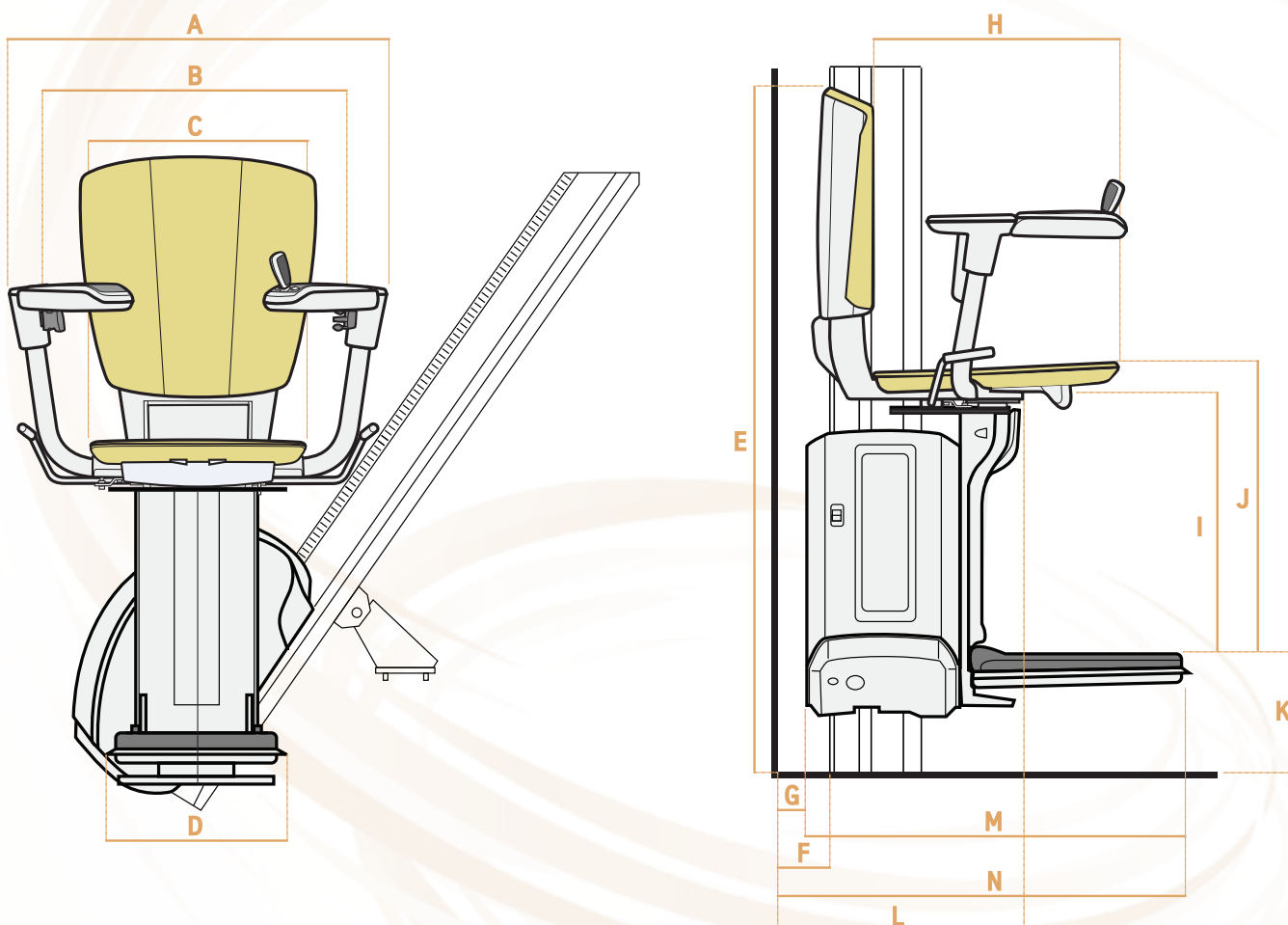

HomeGlide



Der neue HomeGlide *Extra*



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen

Tel. 0800 600 500
www.strack.ch
info@strack.ch